

## 【オムニマットメンテナンスシステム】

汚れたカセットだけ洗えるから、とっても清潔・経済的です。


### オムニマットメンテナンスシステムの特長

- 1. ご契約は、便利な賃貸借契約**  
料金は単価契約で行い、法的理由による場合は契約数の変更ができます。
- 2. 安心のメンテナンス**  
ご要望に応じて、メンテナンスの回数を決定します。
- 3. マットの中身まで、すっきり消毒・洗浄**  
目に見えない、奥深くに潜んでいる菌まで退治できます。

オムニマット専用

## 【プリベントパット（清拭用防水カバー）】

表面は防水加工で消毒剤等の対応が可能です。裏面は吸水加工で湿気を拡散させます。

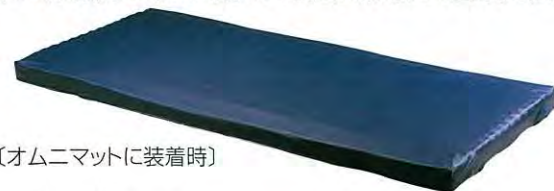

〔オムニマットに装着時〕



コーナーベルト  
(オムニマットの四つ角にベルトで固定します。)

品目	品番	規格	材質	備考	定価	
プリベントパット	OP-781	高80×幅780×長1910(mm)	表地フィルム	耐熱性ポリエチレンゴムラミネート	リバーシブル 表：防水加工 裏：吸水加工	8,580円 (税込)
	OP-881	高80×幅840×長1910(mm)	裏地生地	E100% 吸水加工 コーナーベルト装着		
	OP-981	高80×幅900×長1910(mm)				

■製造元



株式会社オムニ商会

〒069-0210 北海道空知郡南幌町南10線西14番地  
TEL 011-378-7080 FAX 011-378-7081

〈取扱上のご注意〉

- \*中素材使用のポリウレタンフォーム（難燃仕様）の留意点
- 燃焼を抑制する処理を施した難燃性ですが、不燃性ではありません。したがって、火源に接触したり、近づいた場合には発火する危険性がありますので、火のそばには近づけないで下さい。
- 変色する場合がありますので、洗濯の際の使用洗剤には塩素系を使用しないで下さい。
- 口には入れないで下さい。
- \*商品をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。\*仕様などについては変更となる場合がありますのでご了承下さい。



# オムニマットトリオレ

[Trio Re]




# これからの汎用タイプマットレスのスタンダードへ

## オムニマットトリオレ [Trio Re]



裏面スベリ止め加工  
(ベットとマットのズレを軽減)

体表面接触圧(体圧)評価

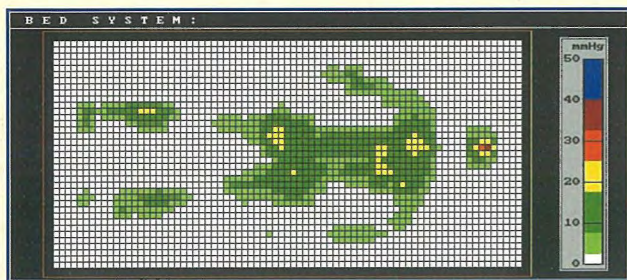

オムニマットトリオレ  
最大加圧: 20.9mmHg

被験者データ/健康者男性 身長:166cm 体重:60kg BMI:21.7  
測定機:ABW社製エルゴチェック

### <サイズ表>

品目	品番	規格
オムニマット トリオレ [Trio Re]	OH-781MT/緑	幅780×長1910×厚80(mm) 重さ5.3kg
	OH-881MT/紺	幅840×長1910×厚80(mm) 重さ5.7kg
	OH-981MT/茶	幅900×長1910×厚80(mm) 重さ6.1kg

### <仕様表>

		材質	定価
カセット 中素材	上部	ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度 40kg/m <sup>3</sup> 硬さ 137N <small>難燃仕様</small>	62,700円 (税込)
	中央部	チップ集成ポリウレタンフォーム <small>難燃仕様</small>	
	下部	ポリウレタンフォーム 密度 40kg/m <sup>3</sup> 硬さ 137N <small>難燃仕様</small>	
カセットカバー	表地/E49: C51(低温プラズマ加工) 裏地/E100%		
セットカバー	E100% 裏面スベリ止めシリコン接着加工 <small>白</small>		


※製品のラベルとバイアステープの色で、緑・紺・茶とサイズ分けしています。  
※掲載の重量は乾燥時のもので、外気の湿度等により若干の誤差があります。  
※特許申請中  
※透析ベット用マットレス、100cm幅マットレス等、別注品も承ります。詳細は担当者までお問合せください。

### オムニマットトリオレの特徴

## 3カセットローテーション

療養環境は洗濯で清潔・快適に

いつも清潔で快適な療養生活は、療養される方にとって当然の願いであり、介助者としても重要なことです。本来マットレスを含む寝具類は、通気性があり、汚れた際には消毒・洗浄可能なものであるべきです。カセット単位の交換・消毒・洗浄が可能なオムニマットは、清潔・快適な療養環境を提供することはもちろん、介助者の方々の労力削減をすることで、大切なケアを最優先させることにお役立ていただけます。

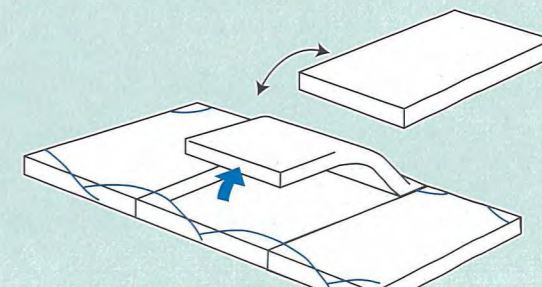

汚れたカセットだけ  
手軽に取り外しが可能です。

## 3層の体圧分散構造

理想的な体圧分散で床ずれ予防

適度なやわらかさの3層構造のウレタンと、プロファイル(凹凸)加工で、理想的な体圧分散を実現。しかも、中央部層のチップ集成ポリウレタンフォームと下部層の軟質ウレタンが体位をしっかり保持し、寝姿勢の崩れを抑えます。マットレス裏面にはシリコン樹脂のスベリ止め加工を施し、安全性にも配慮しております。



## 地球にやさしい3つの「Re」

環境ローテーションの完成

### Re use【再生利用】

オムニマットは、ご使用中に汚れた際でも、消毒・洗浄を行い皆様のもとに戻り、再生利用いただけます。

### Reduce【減量】

オムニマットは、高密度ウレタンとカセット単位のローテーションが可能だから耐久性が高く、廃棄マットの減量化につながります。

### Re cycle【再資源化】

永年お使いいただいで使用済みとなったオムニマットは、集成ウレタンとして再資源化され、トリオレの一部として使用されます。

